




Indicador Óptico de Estados



Lector Magnético de Tarjetas

Indicador de Alteraciones en Líneas Celulares

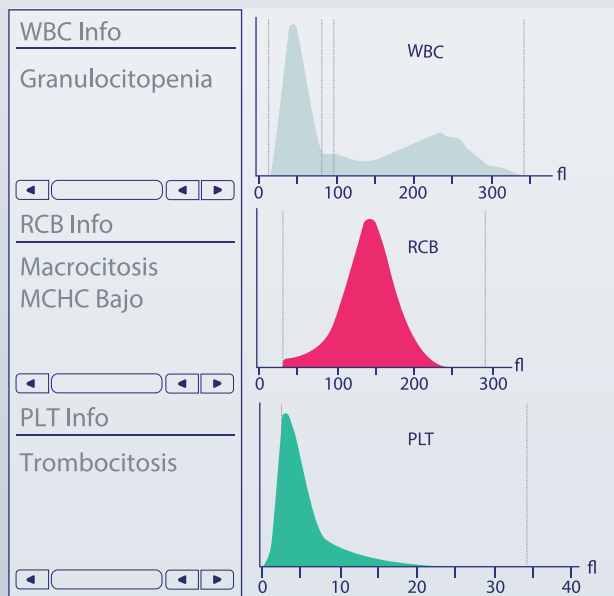

18 Especies

Perro, Gato, Conejo, Oveja, Cabra, Vaca, Caballo, Rata, Ratón, Cerdo, Ciervo Almizclero, Mono, Llama, Hurón, Camello, Ciervo, Tigre y Delfín

22 Parámetros + 3 Histogramas

WBC, Neu #, Lym #, Mid #, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW-DS, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC

Reactivos

- Lisante a bordo del dispositivo en compartimiento interno
- Diluyente 20L
- Una solución limpiadora para mantenimiento

Modo de sangre

Sangre Total, Capilar, Pre-diluida


Modo de conteo inteligente

L-WBC, L-PLT, L-WBC/PLT

60 muestras por hora



Método de impedancia eléctrica

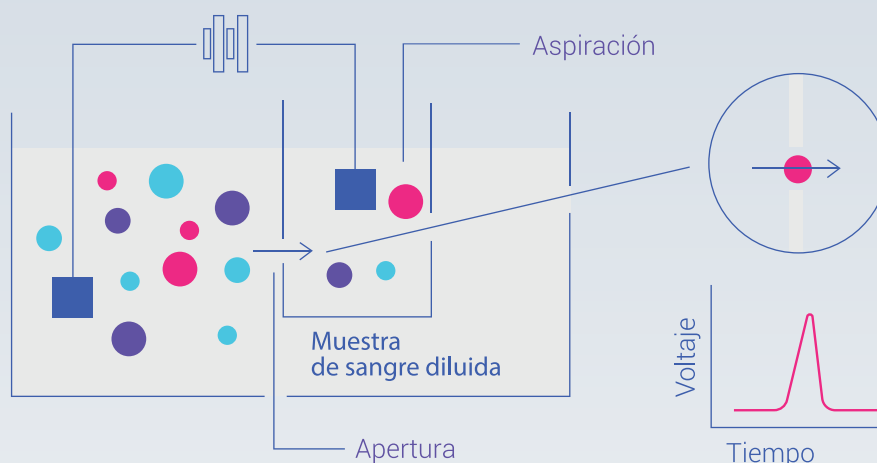

Especificaciones Generales:

Principio Sistema de Fotometría para Medición de HGB
Sistema de Impedancia Eléctrica para Medición de Leucocitos, Eritrocitos y Plaquetas
Método libre de cianuro para HGB

Calibración:

Manual y autocalibración

Volumen de Muestra:

- Modo venoso: 10µL de sangre venosa
- Modo capilar: 10µL de sangre capilar
- Modo prediluido: 20µL de sangre capilar

Voltaje de Operación:

VAC 100V-240V, 50/60 Hz
Consumo: 160VA

Temperatura de Operación y Humedad:

10°C - 35°C y ≤85%

Presión Atmosférica:

70kpa – 106.0kpa

Control de Calidad:

- Tres niveles de control
- Revisión de curvas LJ después de realizar QC

Especificaciones Técnicas:

Rendimiento:

60 muestras / hora
22 parámetros + 3 histogramas

Reactivos:

Diluyente, Lisante, PB Cleanser
3 modos de conteo / Soporte LIS

Idiomas disponibles:

Inglés, español, italiano, portugués

Display: Cristal líquido (LCD) de 10.4 pulgadas y pantalla táctil Resolución de pantalla: 800x600

Almacenamiento:

4 Puertos USB
1 puerto de conexión LAN
600.000 muestras con histogramas

Impresora:

Impresión en Tiempo Real
Impresora térmica Interna
Opción de impresora externa

Dimensiones:

30 cm Ancho - 43 cm
Profundidad - 40 cm Alto Peso:20 kg

Mantenimiento Sencillo:

Fácil mantenimiento diario

Genru:

Información en:

serviciocliente@annardx.com
Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Línea móvil: 318 363 7668 • PBX: (1) 744 7979
Bogotá - Colombia

www.annardx.com

